

清虚内守中医处方软件配置教程

一、数据库安装

1. 到官网下载 MariaDB 地址: <https://mariadb.org>

勾选“显示旧版本” Display older releases, 按下图选参数, 找到版本 mariadb-10.3.39, 点 Download 下载。

备注: 根据 deepseek 提示, win7 可最高支持到 mariadb-10.4.34(经测试有效), 如果下载 mariadb 高版本后双击提示无法安装就要下载低一点的版本。

MariaDB Server MariaDB Server Repositories Connectors

MariaDB Server Version
MariaDB Server 10.3.39

Display older releases: ☒

Operating System
Windows

Architecture
x86_64

Package Type
MSI Package

Download

Mirror
MariaDB Archives

Release date: 2023-05-10
File name: mariadb-10.3.39-winx64.msi
File size: 60.6 MB

2. 安装和普通软件一样, 双击安装。下面的安装界面略微注意即可:

MariaDB 10.2 (x64) Setup

Custom Setup

Select the way you want features to be installed.

Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.

MariaDB Server

- Database instance
- Client Programs
- Backup utilities

Development Components

Third party tools

HeidiSQL

Installs backup utilities (mariabackup and mydumper).
This feature requires 16MB on your hard drive.

Location: D:\Program Files\MariaDB 10.2\

Reset Disk Usage Back Next Cancel

User settings

Default instance properties
MariaDB 10.2 (x64) database configuration

MariaDB Server

☒ **Modify password for database user 'root'**

New root password: Enter new root password
Confirm: Retype the password

☒ **Enable access from remote machines for 'root' user**

☒ **Use UTF8 as default server's character set**

Back Next Cancel

勾选这三项，并设置root密码和字符集

安装的服务名称，端口号等设置，默认即可

Default instance properties
MariaDB 10.2 (x64) database configuration

MariaDB Server

☒ **Install as service**

Service Name:

☒ **Enable networking**



TCP port:

InnoDB engine settings

Buffer pool size: MB
Page size: KB

Back Next Cancel


然后一路 Next/Install 点下去，就完成了。

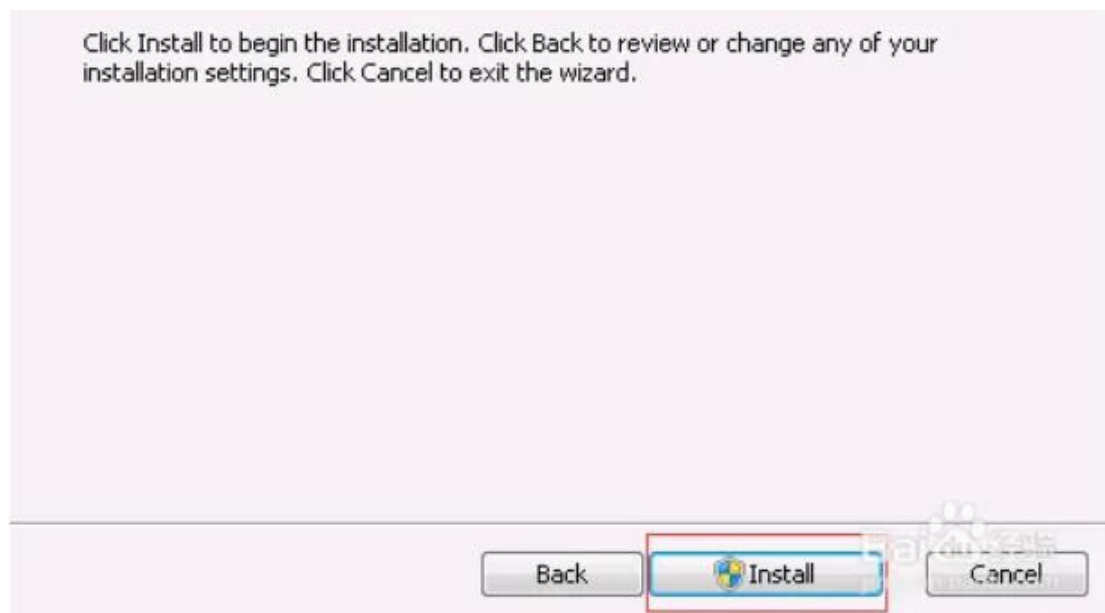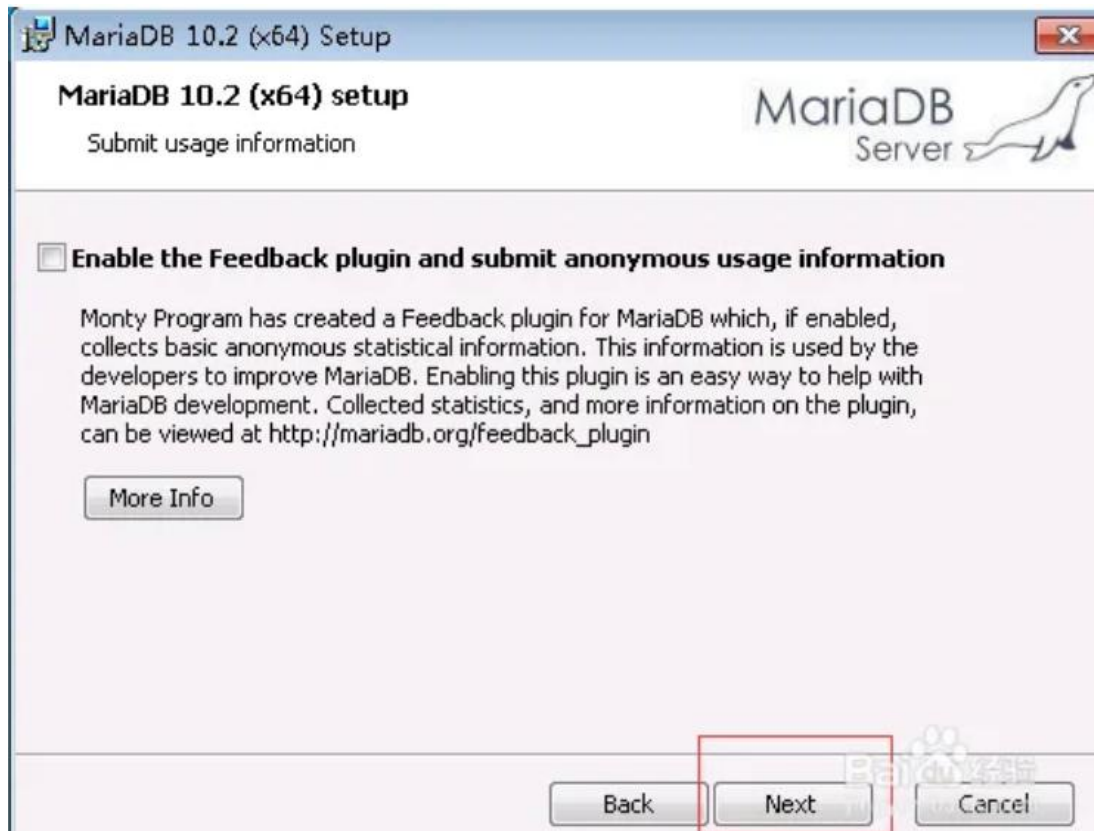




二、数据库管理


1. 安装后使用 MariaDB 自带的工具 HeidiSQL 管理（在开始菜单-程序-MariaDB10.3 中）。点击 HeidiSQL 后，新建连接，并输入之前设置的 root 密码。登录时注意选择的网络类型。Library 用默认的即可。

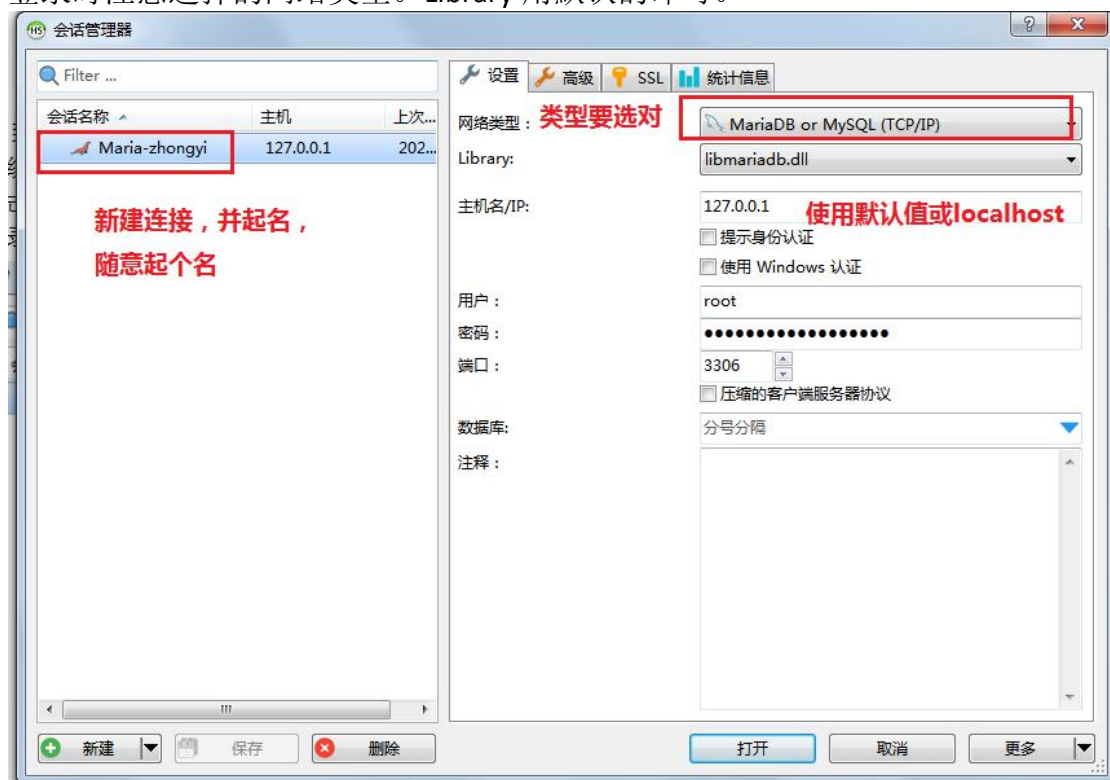



2. 点“打开”登录，创建用于连接数据库的新账户、密码和权限。添加用户和密码：

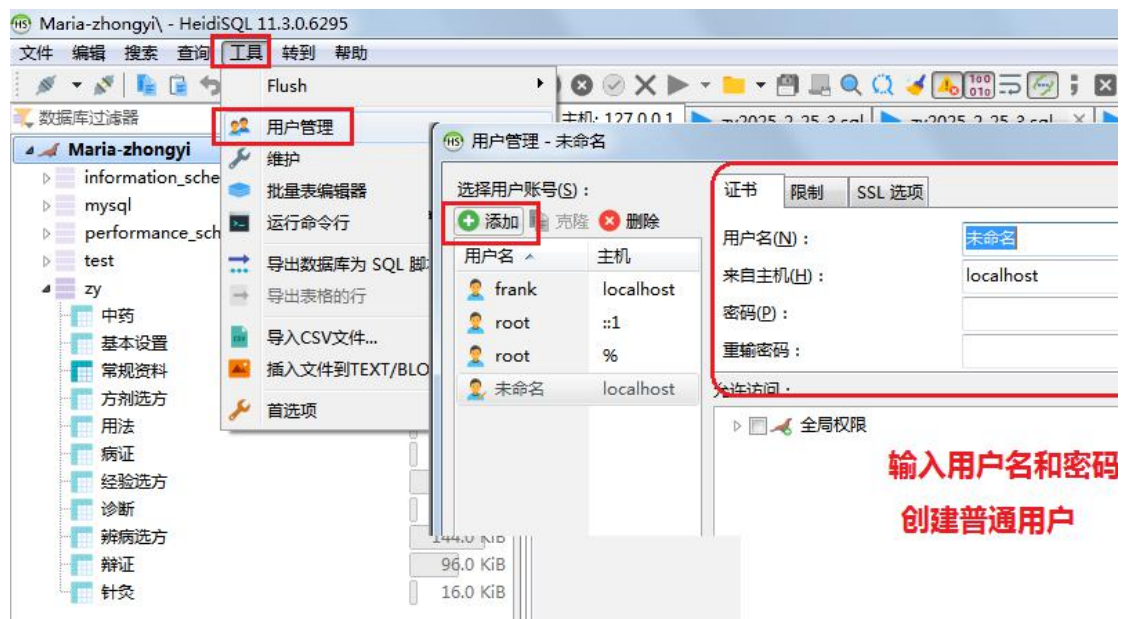

为用户勾选下列权限:

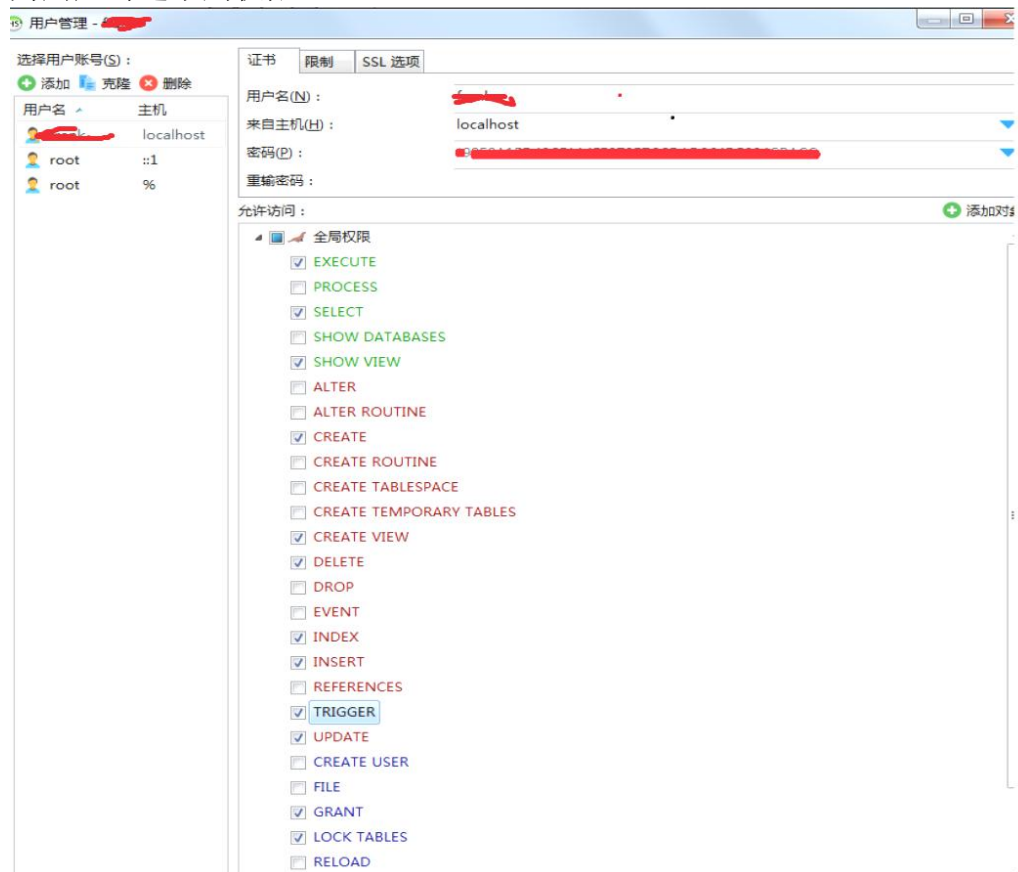

在你创建的连接名上点右键，如下图，创建名为 **zy** 的数据库。这个名字一定要对。不然连不上了。字符校对，要选对。不然可能会乱码。

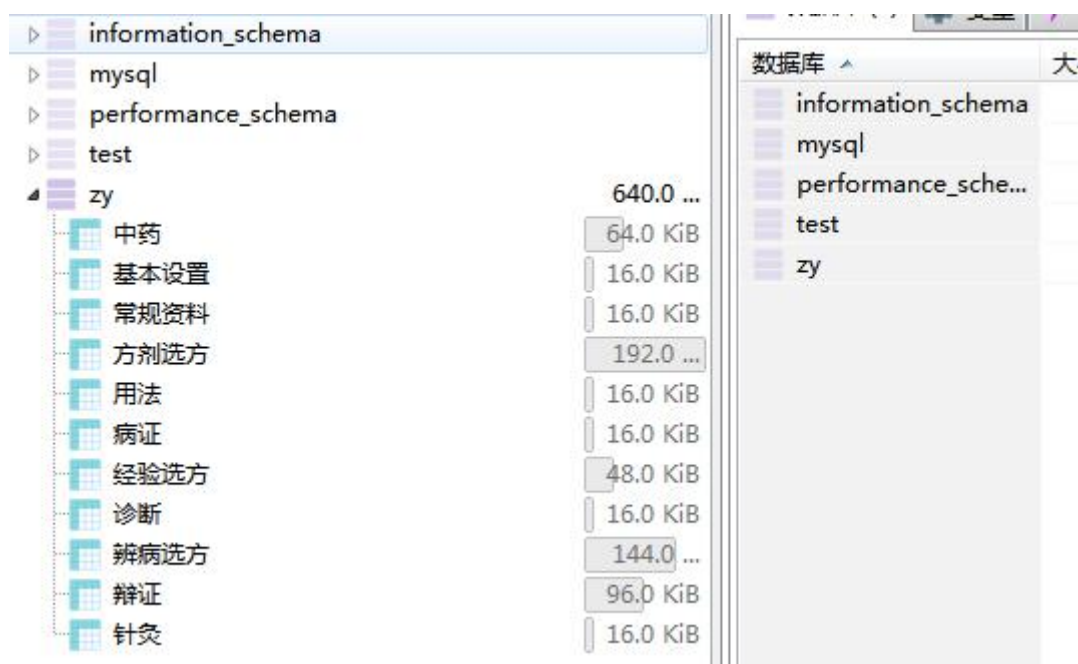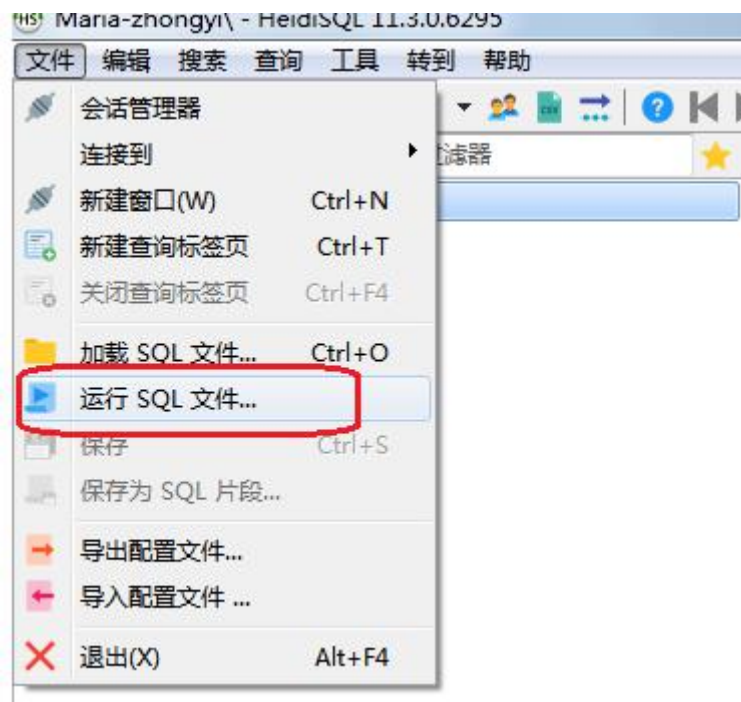

数据库的设置已完毕，退出 HeidiSQL 即可。

三、软件设置

1. 解压软件包后双击 `zhongyi.exe` 文件，首次启动时会弹出连接对话框：输入下面的信息（本地主机是 `localhost`）和自己创建的数据库连接用户名和密码，数据库名为 `zy`，字符集用默认设置好的。然后点击“测试连接”。登录成功后，一般以后就不会再看到这个连接界面了。

注：为避免不必要的后果，建议不要用数据库的 `root` 账户，那个权限太高。



数据库连接配置

主机地址: localhost

端口: 3306

用户名: [REDACTED] 用户名


密码: ●●●●●●●●

数据库名: zyl

字符集: utf8mb4

测试连接

2. 成功后就进入了登录界面，软件默认用户为 Admin（注意，这里**不是数据库用户**），默认密码为空，点登陆直接进入主界面。也可以在此注册用户。进入主界面仍可添加管理用户。

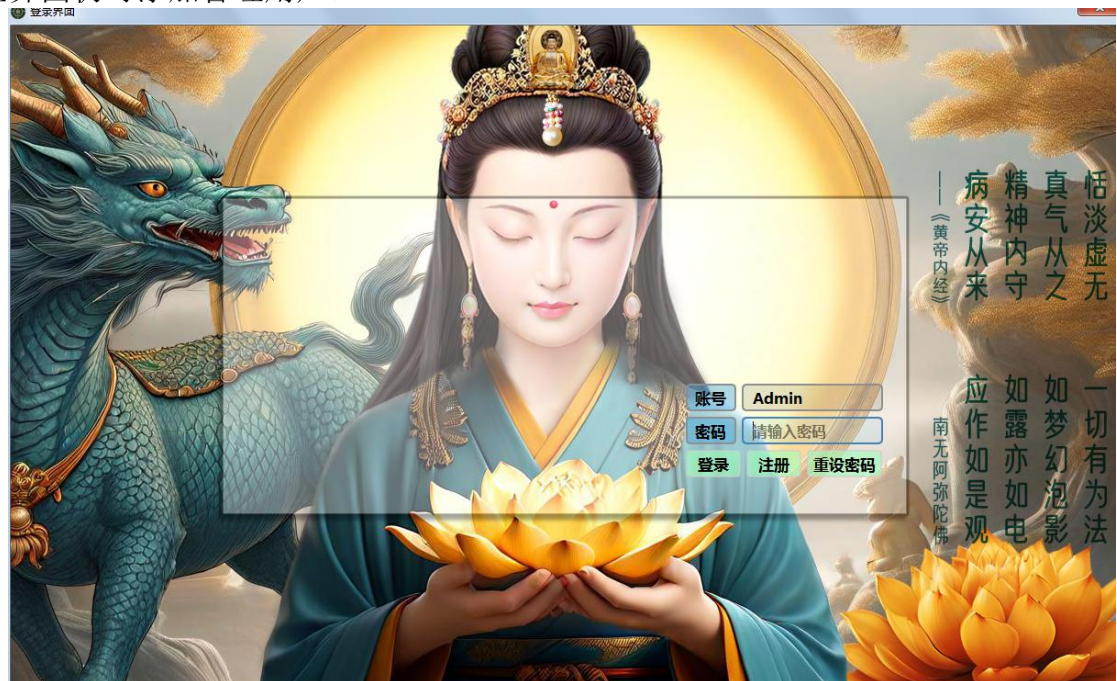

患者资料

姓名	秦石
性别	男
年龄	12岁
病症	风寒感冒...
诊断	感冒后期

针灸或其他疗法

若众生心。忆佛念佛。现前当来。必定见佛。去佛不远。不假方便。自得心开。如染香人。身有香气。此则名曰。香光庄严。我本因地。以念佛心。入无生忍。今于此界。摄念佛人。归于净土。佛向圆通。我无选择。都摄六根。净念相继。得三摩地。斯为第一。

中药治疗

药物	剂量	用法
1 金银花	10	
2 薄荷	12	
3 荆芥穗	10	
4 连翘	10	
5 半边莲	30	
6 板兰根	30	

用法

充分搅拌使颗粒溶解。分早晚两次服用，或遵医嘱。注意事项：请用开水冲泡，如有少量...
备注
一切有方法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

病证表现

风寒感冒
咳嗽痰喘
风寒感冒
咳嗽痰喘

一时辩证

风热表证
肝经湿热
风热表证
外寒内热证
湿热下注

辩证选方

病历查询

姓名	性别	年龄	诊断	日期时间
1 秦石	男	12岁	感冒后期	2025-02-27 ...
2 秦石	男	12岁	感冒后期	2025-02-27 ...
3 秦石	女	12岁	感冒后期	2025-02-27 ...
4 手动输入	女	12岁		2025-02-27 ...

姓名 姓名拼音缩写 诊断 诊断拼音缩写
2022-02-27 至 2025-02-27

初诊 复诊
保存 删除

常见病证表现

1 沉脉
2 咳嗽痰喘
3 出汗
4 消化不良
5 风寒感冒
6 风热感冒

常用辩证处方

1 外寒内热证
2 风寒表证
3 风热表证
4 湿热下注
5 肝经湿热
6 九味羌活汤

针灸等 1 次 计价 20.00
中药 1 付 计价 125.46
(含诊金) 合计 195.46
带证候打印 无证候打印

3. 软件的使用很容易上手无需多言，点击“初诊”就可以创建病历。只有一处略加图说。
剩下的请自行探索吧。

患者资料

姓名	秦石
性别	男
年龄	12岁

病证表现

风寒感冒
咳嗽痰喘
风寒感冒
咳嗽痰喘

常见

1 沉脉
2 咳嗽痰喘
3 出汗

比较对象：甲 姓名 秦石

姓名	诊断	病证	血压	药物1	药物2
1 秦石	感冒后期	风寒感冒...	140/90	金银花	薄荷
2 秦石	感冒后期	沉脉...	130/90	白芍	牡蛎
3 秦石	感冒后期	风寒感冒	120	石膏	薄荷
4 手动输入			120		

对比结果


对比项目	比较对象：甲	比较对象：乙
姓名	秦石	秦石
诊断	感冒后期	感冒后期
病证	风寒感冒...	沉脉...
血压	140/90	130/90
辩证	风热表证...	风寒表证
针灸或其他	若众生心。忆佛念佛。现前当来。必定见佛。去佛不...	若众生心。忆佛念佛。现前当来。必定见佛。去佛不...
药物1	金银花	白芍
药物2	薄荷	牡蛎
药物3	荆芥穗	龙骨
药物4	连翘	浮小麦
药物5	半边莲	
药物6	板兰根	
药物7		
药物8		

此处需同时选中两行才可以进行比较以及上传照片。


病历比较 病历比较

四、如何导出 sql 数据库

软件使用久了，自然有很多数据，定期保存，以免不必要的麻烦。

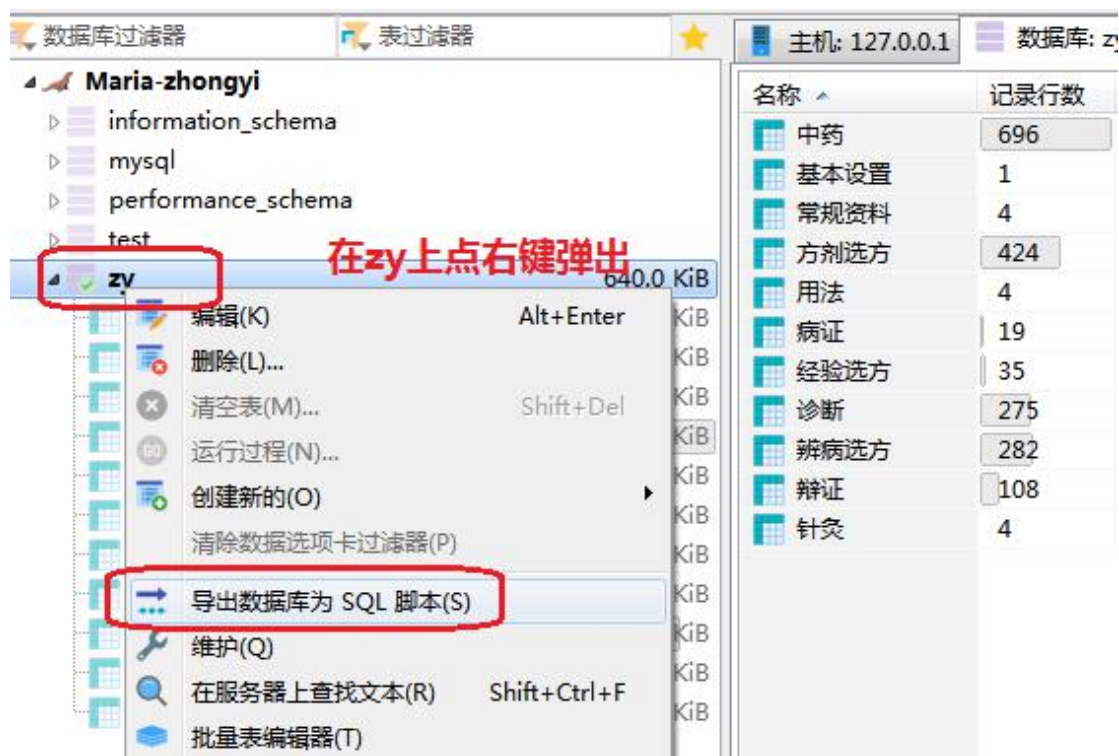

勾选如下，并选中一个路径和名称，点击“导出”即可：

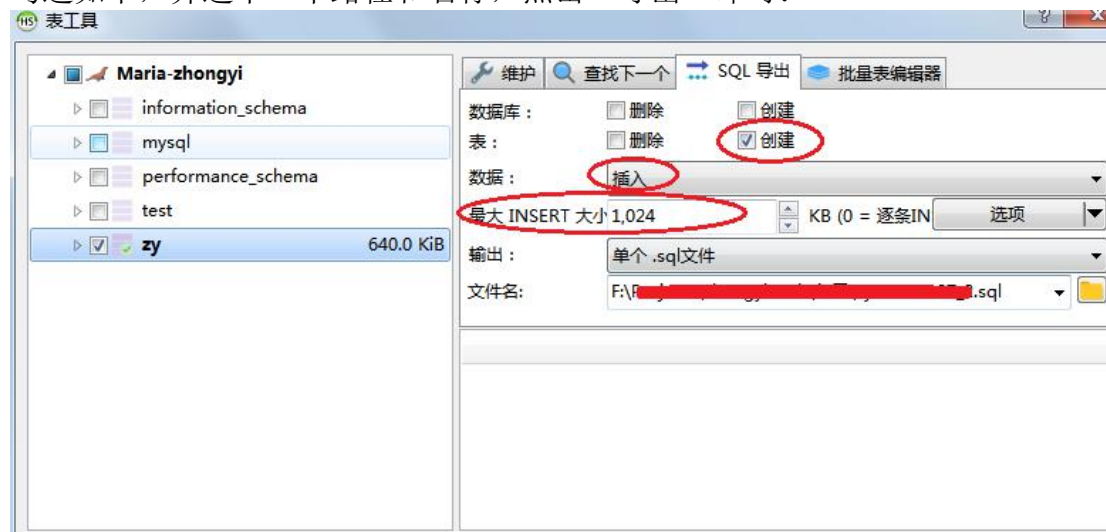

愿天下无疾

